



BLOOMEA

PARIS

NEOCARE

Elite

NÄGU & KEHA

NEOCARE ELITE

*Maailmas unikaalne
patenteeritud
3 erineva voolu kombinatsioon:*



*NeoCare Elite
tervitab teid uues loomuliku
esteetilise ravi ajastus.
Uusim mitteinvasiivsete protseduuride põlvkond.*

NEOCARE *Elite*

VANANEV
NAHK

1

KONTUURIMINE

2

*Tehnoloogia töötati
välja näo ja keha
kontuurimiseks.*

Mõju on
**TEADUSLIKULT
TÕESTATUD**
histoloogiliste uuringutega



Miks tuleks

NEOCARE
Elite

kasutada?



KEHA

***Võideldge naha lõtvumise ilmingute vastu kõhul, seljal,
käsivartel või reitel.***

***Muutke keha siluetti – keha kontuurimine – cm kaovad
Töödelge 3 tüüpi tselluliiti – naha tekstuur***

Vähendage vedelikupeetust – vedeliku drenaaž



NÄGU

Võidelda *kortsude ja lõtvumise vastu*
Muutke *nahk paksemaks* – kudede tihenemine
Eemaldage peetunud vedelik (kotid, tumedad rõngad)
Vähendage topeltlõuga



[INNOVATIIVNE]

NEOCARE Elite

VABASTAGE ENERGIA

1

NEOCARE ELITE
KASUTAB ERINEVAID
VOOLUTÜÜPE

3

2

1 PROTSEDUUR = 3 ERINEVAT VOOLU

TECAR KÕRGSAGEDUSLIK 300 kHz ... 1MHz

Winback TECAR on dünaamiline
kõrgsageduslik vool sagedusega
300 kHz...1 MHz.

TECAR vool mõjutab rakke ja
soojendab kudesid.

KASULIKUD TOIMED

Kudede remodelleerimine
Rasva eemaldamine
Neokollagenees,
Kudede pinguldamine

HI-EMS moduleeritud KESKMISE SAGEDUSEGA

Hi-EMS
(elektro-müostimulatsioon)
kasutab lihaseid tugevdavat
moduleeritud kesksageduslikku
voolu (1,5... 4 kHz).

KASULIKUD TOIMED

Lihaseid tugevdav,
drenaaži soodustav ja
metabolism ergutav
süvalihaste kontraktsioon

HI-TENS MADALSAGEDUSLIK pulseeriv

Hi-TENS kasutab impulssidena
madalsageduslikku (2...25 Hz)
transkutaanset elektrilist
närvistimulatsiooni (TENS),
mille tulemuseks on
lihaskiudude kontraktsioonid.

KASULIKUD TOIMED

Lõdvestus
Drenaaž / turse leevendamine




QUADRICORE

Ü L E 200 W

Innovaatiline *QuadriCore* ja selle 2 ajamit võimaldavad seadme *Neo Care Elite* kahe sõltumatu kanali kaudu *samaaegselt optimaalselt kasutada mitut erinevat voolu*.

E-Magnescence võimaldab protseduure *kuni kolmel patsiendi kehapiirkonnal*. Keskmine protseduuri aeg on *15...30 minutit*.

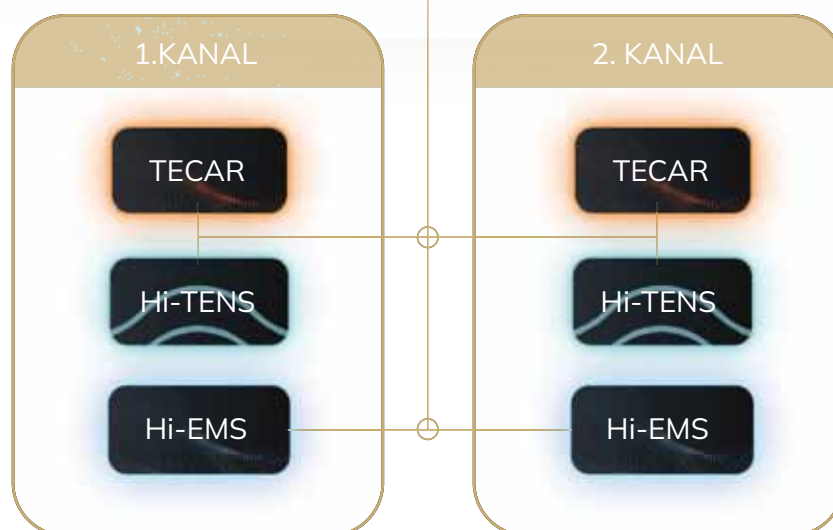

INTELLIGENTNE

JUHITAV

TX

AUTOMAATNE ELEKTROODIDE
TUVASTAMINE

ELEKTROODID
ÜHES SEADMES

PROGRAMMI VAHETUS
DISTANTSILT

Ergonoomiline haare

Nutikas valgustus

Liikumisandurid

1 pult erinevatele elektroodidele

Lihtne ja tugev kinnitussüsteem



TX ON PATENTEERITUD INNOVATSIOON

TX on uus intelligentne ja ergonoomiline pult, mis tunneb elektroodid automaatselt ära ja tagab võimaluse töötada kõikide Bloomea elektroodide kasutamisel mõlema käega.

Dünaamiline Lülitamine

ANNAB TEILE KINDLUSTUNDE: tehisaru muudab protseduuri ohutumaks

Varustatuna TX-intelligentsete pultidega arvutab dünaamiline lülitusfunktsioon automaatselt optimaalse patsiendi kudesid läbistava energia. Selleks analüüsitakse reaajas

Voolu

(intensiivsus, takistus, kudede bioloogiline koostis)

Elektroode

(tüüp, suurus, omavaheline kaugus, liigutused jm)

Tulenevalt *NeoCare Elite* innovatsioonist on protseduur kaks korda kiirem ja võimaldab terapeudil *kiiremini ja tõhusamalt* töötada.

Integreeritud protokolle on lihtne õppida.




Teil on võimalik töötada kuni kolmes piirkonnas kasutades samaaegselt kõiki elektroodi- ja voolutüüpe.

A person wearing a grey sweater is holding two white handheld devices with black circular heads. The background is white with faint, overlapping geometric shapes.

NeoCare Elite : voolu toime



Toime- mehhanismid

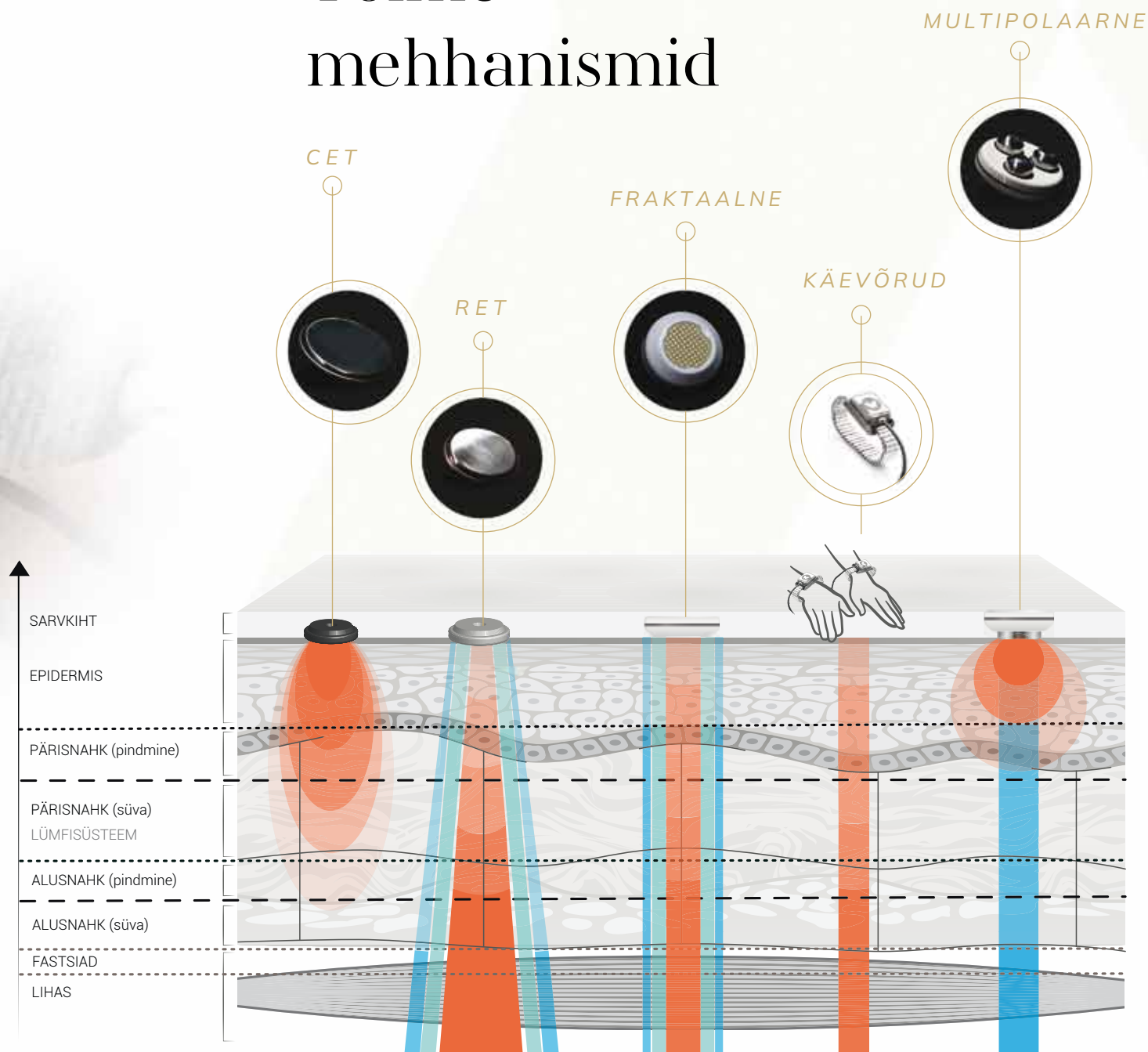

- TECAR-VOOLU TOIME**
 Kõigi kolme nahakihi rakkude stimulatsioon -
 kudede remodelleerimine, rasva eemaldamine,
 neokollagenees, kudede pinguldamine
- HI-EMS-VOOLU TOIME**
 Tugev lihaskontraktsioon ainevahetuse kiirendamiseks ja
 tulemuste võimendamiseks.
 Soodustab eriti tõhusalt lümfidrenaaži.
- HI-TENS-VOOLU TOIME**
 Väikeste lihaste kontraktsioon lõdvestava toime saavutamiseks.

Füsioloogilised toimed

NEOCARE ELITE PROTSEDUUR

Nii nagu treener aitab hoida keha vormis, on see protseduur treening rakkudele, ergutades kõiki naha füsioloogilisi funktsioone ja aidates seega aeglustada ja pärssida aja mõjusid.

S U U R E N E B

- + elastiini *tootmine*
- + kollageeni *hulk*
- + *hüaluroonhappe* hulk

P A R A N E B

- + *lümfi*vool
- + *vereringe*
- + rakkude *ainevahetus*: fibroblastid, adipotsüüdid
- + *fastsiate* liikuvus

V Ä H E N E B

- + vedeliku *peetus*
- + *lihaspinge*
- + *fibroos*
- + *adipotsüütide* ladestumine





Histoloogilised uuringud on näidanud protseduuri tõhusust

Pärisnahas tihenevad elastiini ja kollageeni kiud. See on naha vananemist aeglustav kiudude tihenemine.

T U L E M U S E D

+20% elastiini
Kollageeni kiudude
tiheduse taastumine

*Pärast kolme protseduuri
7 kuni 10 päeva jooksul*

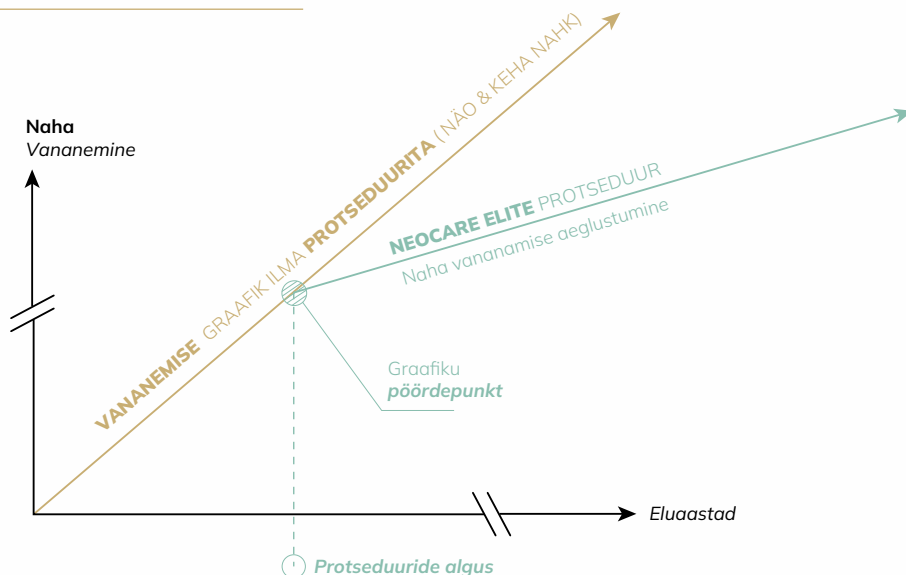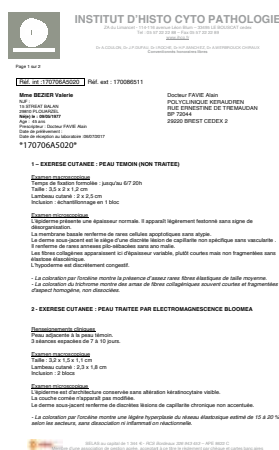

Andmed

Toide
100-240V a.c. 50/60Hz, 300VA

Maks. voolutarve
300W

Wifi
2400-2483.5MHz

Maks. võimsus
up to 20dBm

Size
403.6x379.0x190.5mm

Weight
6kg

Keskkonnatingimused
Temperatuur

-10°C to 40°C

Niiskus
20 to 90%

Rõhk
800 to 1060hPa

Tarvikud

2 CET *elektroodi* 60
2 CET *elektroodi* 40
2 RET *elektroodi* 60
2 RET *elektroodi* 40
2 CET *konveks* 60
2 RET *konveks* 40
2 *multipolaarset elektroodi suur*
2 *multipolaarset elektroodi väike*
2 TECAR X *pulti*
2 RET *kinnitusplaati*
2 RET *käevõru*

1 neutraalne *plaat*
1 neutraalne *pult*
1 Hi-RET (Fraktaalne) *elektrood*
1 kinnitus*plaat*
2 RET kleebitavat *kaablit*
1 neutraalne kleebitav *kaabel*
2 RET / CET üld *kaablit*
1 neutraalne üld*kaabel*
1 hädaseiskamis *nupp*
1 toite*kaabel*
2 liigutatavat TECAR *pulti*





Teretulemast Bloomea maailma

Tooge nähtavale energia, mis teeb iga inimese isikupäraseks ja säravaks.

Tundes ennast oma nahas ja kehas hästi avate oma tõelise ilu. Meie tehnoloogia suudab paljastada selle kõikehõlmava ja tõelise ilu, mis saadab meid kogu elu vältel.

Meie missioon

Võimaldada professionaalidel avada patsientide ilu ja heaolu innovatiivsete, intuiitivsete ja mitteinvasiivsete lahenduste abil.

Meie uudsed mitteinvasiivsed tehnoloogilised nahaprotseduuride lahendused on ergonoomilised ja teaduslikult tõestatud ning loodud iluteenindajatele nahahoolduse lihtsustamiseks ja parendamiseks.

Bloomea Paris loodi Prantsuse plastikakirurgide poolt 2012. aastal.

Alates 2022. aastast, on Bloomea Paris maailma juhtiva meditsiinilise füsioteraapia valdkonna TECAR-tehnoloogiat arendava Winback Group osa.

Me toodame oma seadmed 7 tütarettvõttes, ja need on saadaval jubal 55 maailma riigis.

Innovatsioon
Kirg
Hoolimine
Asjatundlikus
Julgus

NeoCare Elite
Uusim tipptehnoloogia esteetilises meditsiinis.

NÄGU & KEHA



BLOOMEA

P A R I S

